

TAASTAGE TSEMENTEERIGE PARANDAGE

CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW



KOLM TEIE VAJADUSTEGA KOHANDATUD VOOLAVUSTASET

Juba viiel aastal esimesi auhindu võitnud universaalne voolav komposiit CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow on nüüd saadaval kolme erineva voolavustasemega. Kõiki voolavustasemeid saab kohandada teie vajadustega, mis annab tulemuseks kergesti valmivad, vastupidavad ja esteetiliselt nauditavad restauratsioonid. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow sobib täiuslikult väga mitmesuguste näidustuste korral. Ainus komposiit, mida vajate.

- ✓ Suurepärase läikepüsivus
- ✓ Lihtne poleerida
- ✓ Vastupidavad restauratsioonid
- ✓ Mitmekülgsed näidustused

High

Low

Super Low

VOOLAVUS



HEA VOOLAVUS

- ✓ Suurepärase katvus ja kohandatavus
- ✓ Lainerina
- ✓ Väikeste kaviteetide jaoks



VAHEPEALNE VOOLAVUS

- ✓ Esi- ja tagahammaste mitmesugusteks restauratsioonideks




VÄHENE VOOLAVUS

- ✓ Sobib ideaalselt esihammaste kõprude ja servade konstrueerimiseks
- ✓ Säilitab vormimisel antud kuju


MITMEKÜLGSED NÄIDUSTUSED

- ✓ Kõikide kaviteediklasside (I kuni V), hambakaela kahjustuste (nt juurepinna kaarise, V-kujuliste defektide), hammaste kulumise ja hambaerosioonide direktsed restauratsioonid
- ✓ Kaviteedi alus/lainer
- ✓ Hamba asendi ja kuju korrektsioonid
- ✓ Purunenud restauratsioonide suuõõnesisene parandamine
- ✓ Keraamiliste ja komposiitmaterjalist alla 2 mm paksusega inlay'de, onlay'de ja laminaatide tsementimine

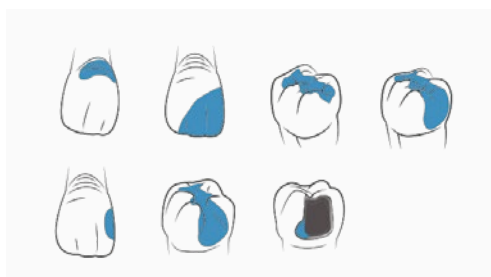

ERAKORDELT LIHTNE POLEERIDA NING LOOMULIKU, KOHESE JA KAUPÜSIVA LÄIKEGA

Spetsiaalsed submikronilised täidised liituvad ja jäävad püsivalt kokku tänu Kuraray Noritake Dentali unikaalsele omaloodud silaankontakt ainele, mis loob restauratsiooni pinnal silmapaistva läike ja muudab pinna poleerimise äärmiselt lihtsaks. Erilised valgusefekti osakesed täidises tekitavad suurepärase värvi kohandumise ja sulanduvad hambastruktuuriga ühtseks märkamatuks tervikuks.

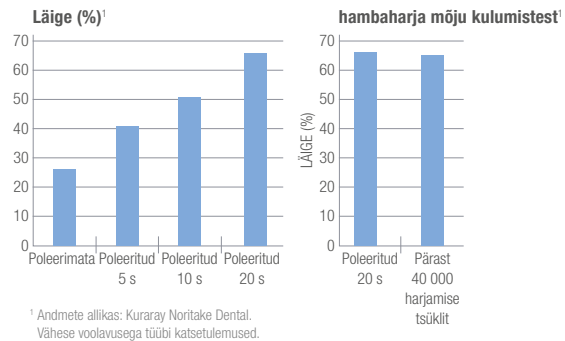

SUUREPÄRASED MEHAANILISED OMADUSED

Kuraray Noritake Dentali omaloodud silaankontaktaine võimaldab suuremat täiteosakeste sisaldust täidises (kuni 78 massi%, 64 mahu%), mis annab hiilgavad mehaanilised omadused ja muudab selle sobivaks isegi tagahammaste restauratsioonideks.

	Paindetugevus	Survetugevus
Super Low	152 MPa	374 MPa
Low	151 MPa	373 MPa
High	145 MPa	358 MPa

Vastavalt standardile ISO 4049:2009. Allikas: Kuraray Noritake Dental Inc.


LAITMATU JA LIHTNE KÄSITLEDA

Loodud parimaid käsitsemisvõimalusi silmas pidades. Erinevate täiteosakeste kuju ja suurus tagavad materjali suurepärase käsitsetavuse ning lihtsustavad kasutamist ja vormimist.


- ✓ Mittekleepuv komposiit.
- ✓ Tänu süstla spetsiaalsele siseosa konstruktsioonile tekib väljastamisel minimaalselt õhumulle.

PAKUTAVAD TOONID


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low

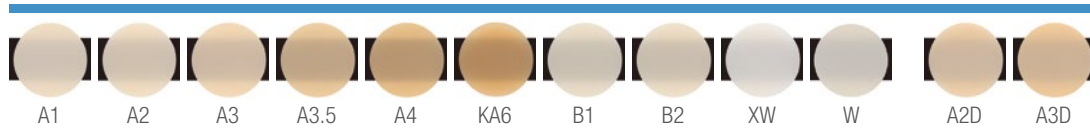

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

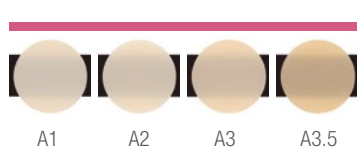

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High

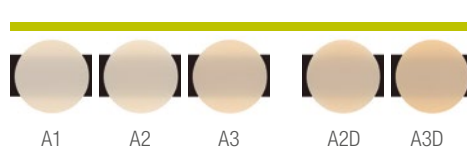

TOOTETEAVE CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

ARTIKKEL NR	TOOTE KOOSTIS
#3341-EU	Super Low (A1) 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3342-EU	Super Low (A2) 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3343-EU	Super Low (A3) 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3344-EU	Super Low (A3.5) 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3301-EU	Low A1 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3302-EU	Low A2 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3303-EU	Low A3 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3304-EU	Low A3.5 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3305-EU	Low A4 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3306-EU	Low KA6 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3307-EU	Low B1 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3308-EU	Low B2 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3309-EU	Low XW 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3310-EU	Low A2D 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3311-EU	Low A3D 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3312-EU	Low W 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa

ARTIKKEL NR	TOOTE KOOSTIS
#3321-EU	High (A1) 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3322-EU	High (A2) 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3323-EU	High (A3) 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3324-EU	High (A2D) 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3325-EU	High (A3D) 1 süstal (2,7g/1,5ml), 15 nõelaotsa
#3331-EU	Nõelaots (N) 20 nõelaotsa

Lisateavet leiate veebisaidilt kuraraynoritake.eu/ee/clearfil-majesty-es-flow